

HAUPTKATALOG



**MEDICAL CARTS
FÜR IHRE PRAXIS**

MEDICAL CARTS

DIE IHREN ARBEITSALLTAG ERLEICHTERN

willkommen in der Welt von DEMED Medical Carts,
Ihrem zuverlässigen Partner für hochwertige
medizinische Gerätewagen aus Stahl.

Unsere fahrbaren Medical Carts zeichnen sich durch ihre hohe Qualität,
Funktionalität und Langlebigkeit aus. Sie bieten eine praktische
und effiziente Lösung zur Organisation und Aufbewahrung von
medizinischen Geräten, Instrumenten und Materialien.
Darüber hinaus sind sie ergonomisch gestaltet und erleichtern
somit den Arbeitsalltag des medizinischen Personals.

Entdecken Sie die Vielfalt und Qualität von DEMED
made in Germany, dem führenden Hersteller für
Medical Carts und investieren Sie noch heute in Ihre
medizinische Einrichtung.

Ihr DEMED MEDICAL Team







Abb. zeigt: Medical Cart PX3s, Behandlungsliege unseres Partners BRUMABA

INHALT

DEMED QUALITÄT	S. 6-13
Puristisches Design	7
Hochwertige Komponenten	8
Verdeckte Lenkrollen & versteckte Kabel	9
Individuelle Konfiguration & freie Farbwahl	10
So wird ihr Arbeitsplatz ergonomisch	12
PRODUKTE	S. 14-35
Produktübersicht	14
Medical Carts Premium	15
E-Serie	16
D-Serie	18
P-Serie	20
PX-Serie	22
K-Serie	24
S-Serie	26
Tray-Cart	28
Tische	
Instrumententisch	30
Brückentisch	32
Zubehör	34
Medical Carts Basic	40
DL-Serie	42
CX-Serie	44
S24-Serie	46
Welcher Cart für was?	48
SERVICE & BERATUNG	S. 54-55

DEMED QUALITÄT, ZAHNTASTISCH GUT.

Puristisch durchdachtes Design aus langlebigen Materialien wie Stahl, Edelstahl oder Aluminium, tragen zur Funktionalität und Anordnung von Geräten bei und ermöglichen eine leichte Reinigung zum Erhalt der Hygienestandards. Umfangreiches Zubehör unterstützt eine einfache Handhabung im Praxisalltag.

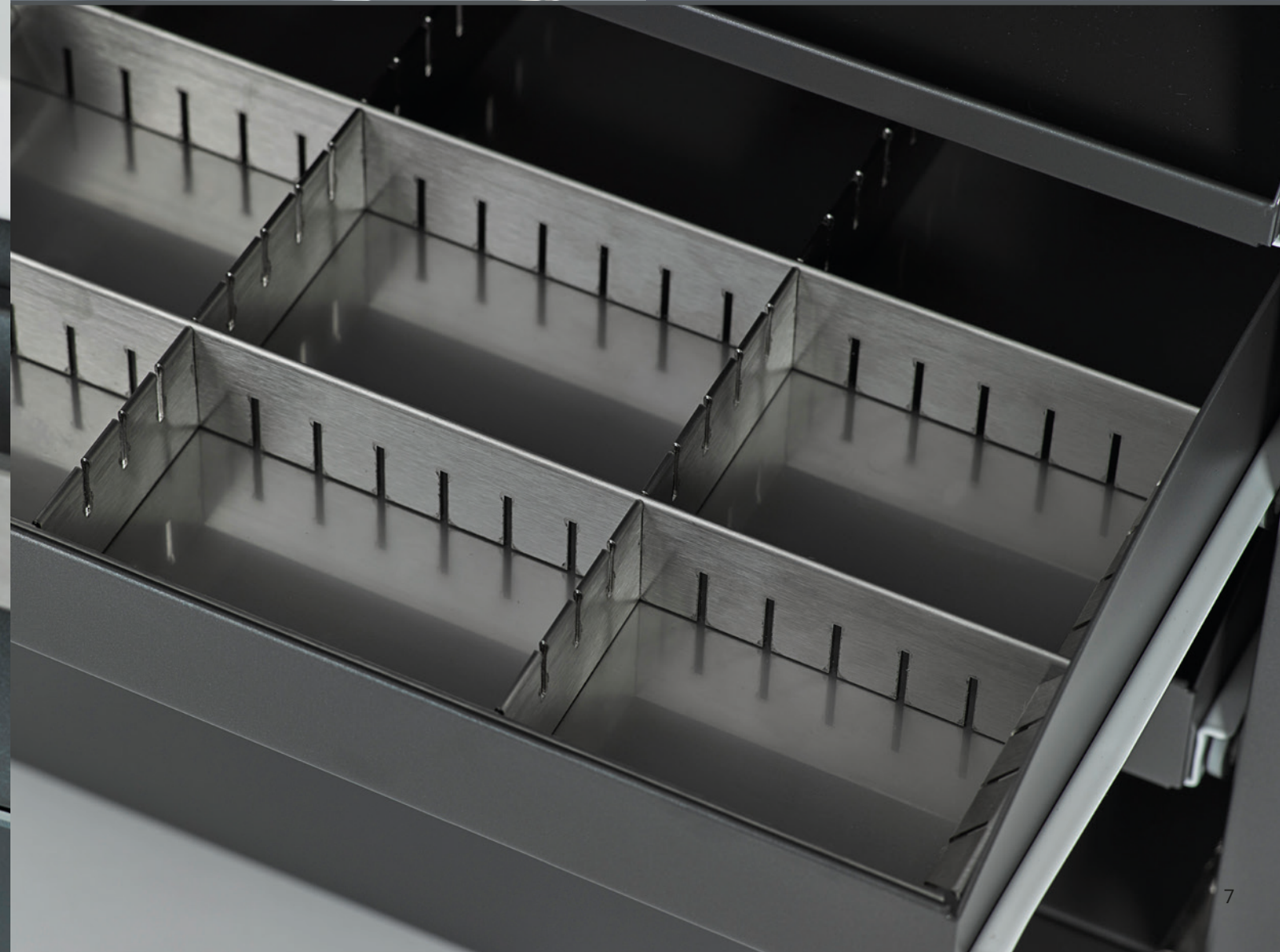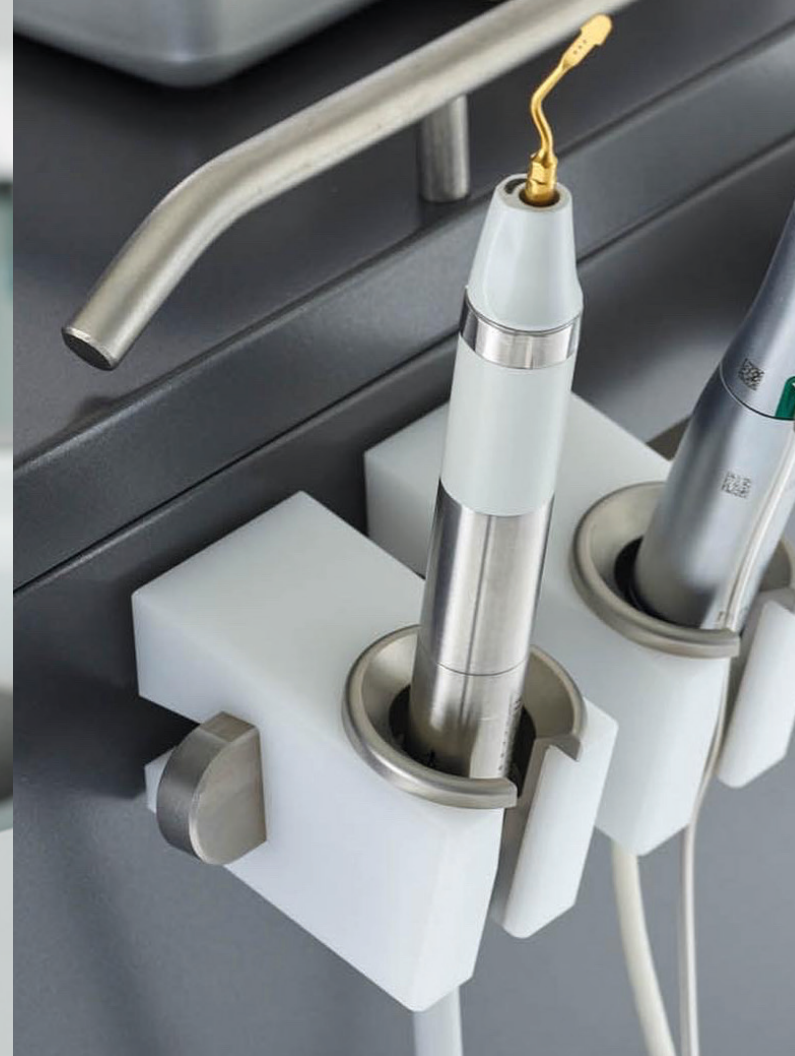

HOCHWERTIGE KOMPONENTEN

tragen zur Langlebigkeit unserer Medical Carts bei. Wir verwenden ausschließlich hochwertige Bauteile wie gestrahlte Griffe, Normschienen aus Edelstahl und Türen aus Sicherheitsglas, das macht unsere Medical Carts einzigartig.



VERDECKTE LENKROLLEN – EIN MITARBEITER DER IHNEN FOLGT

Alle DEMED MEDICAL Carts verfügen über leichtgängige, integrierte Lenkrollen, die eine einfache Bewegung und einen sicheren Transport Ihrer Geräte in Ihren Räumen ermöglichen.

Übrigens: Auf unsere Lenkrollen erhalten Sie lebenslange Garantie.



KABELMANAGEMENT

An den entscheidenden Stellen befinden sich integrierte Kabeldurchführungen und eine Mehrfachsteckdose mit einzigartigem Kabelaufroller im Unterboden. Somit gehören gefährliche Stolperfallen und Kabelbruch der Vergangenheit an.



INDIVIDUELLE KONFIGURATION

ermöglicht eine Zusammenstellung Ihres Medical Carts **PREMIUM** auf Ihre eigenen Bedürfnisse und Anforderungen. Wählen Sie aus verschiedenen Schubladenhöhen, unterschiedlichen Fachauszügen und Ablagefächern. So finden sämtliche Geräte und Instrumente ihren Platz.



Abb. zeigt: Medical Carts der Serie E5

FREIE FARBWAHL

Dank einer hochwertigen Pulverbeschichtung in allen Farben des RAL-Classic-Farbsystems, passt sich Ihr Medical Cart Ihrer Umgebung an oder setzt auf Wunsch einen Farbakzent.



Abb. zeigt: Medical Cart PX3s und PX3



Abb. zeigt: Medical Carts P-Serie und S-Serie

SO WIRD IHR ARBEITSPLATZ ERGONOMISCH

Höhenverstellbarkeit bei unseren Instrumenten- und Brückentischen ermöglichen es, die Arbeitsfläche individuell an die Bedürfnisse und Körpergröße des Benutzers anzupassen.



Integrierte Rollen sorgen für Beweglichkeit und Flexibilität, welche die Arbeitsabläufe verbessern und die Effizienz steigern.



Durchdachtes Zubehör ist da, wo Sie es benötigen. Somit werden eine optimale Arbeitsposition und gesunde Körperhaltung gefördert.



VERBESSERT UNSEREN ARBEITSABLAUF

„Ich bin von der Größe und der Handhabung des Brückentisches beeindruckt. Behandlungsabläufe und Ergonomie haben sich durch ihn erheblich verbessert. Die Höhe des Tisches kann ich auf meine individuellen Bedürfnisse abstimmen, was mir mehr Komfort und Effizienz bei der Arbeit bietet. Besonders beeindruckt bin ich von der soliden Verarbeitung und der hervorragenden Haltbarkeit des Tisches.“




Prof. Angelo Cardarelli
(Master of Piezo Surgery)
aus Isernia, Italien


PRODUKTÜBERSICHT

MEDICAL CARTS PREMIUM


S. 15-39

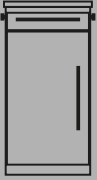

E-Serie
S. 16

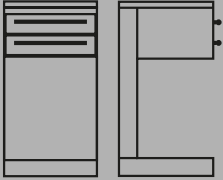


PX-Serie
S. 22

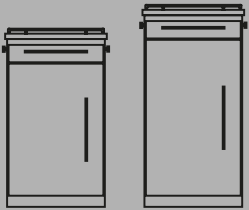

D-Serie
S. 18




K-Serie
S. 24

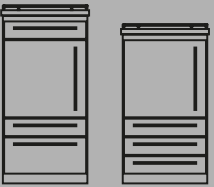


P-Serie
S. 20




S-Serie
S. 26

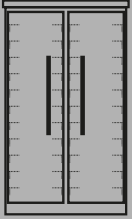


Tray-Cart
S. 28

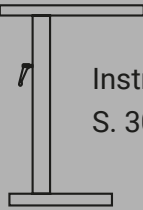

Instrumententisch
S. 30

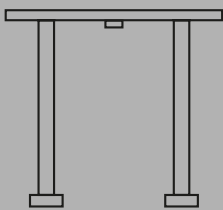


Brückentisch
S. 32

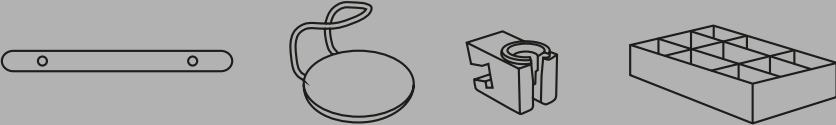


Zubehör
ab S. 34

MEDICAL CARTS BASIC

S. 40-46

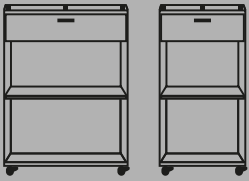

DL-Serie
S. 42

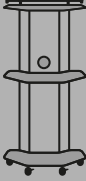

CX-Serie
S. 44



S24-Serie
S. 46


MEDICAL CARTS PREMIUM

INDIVIDUELL KONFIGURIERBARE GERÄTEWAGEN
IN BESTER QUALITÄT FÜR ERGONOMISCHES
ARBEITEN IN IHRER PRAXIS.





E-SERIE

Schrank und schlank: ohne wertvollen Platz zu beanspruchen oder den Raum zu überladen, besteht diese Serie mit nur 42 cm Breite. Dennoch groß genug, um viele Geräte zu verstauen und schlank genug, um nicht so viel Platz einzunehmen.

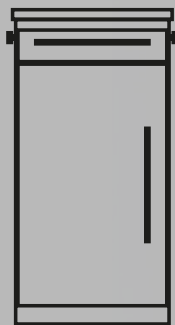

D-SERIE

Die Serie mit dem größten und höchsten Volumen, bietet reichlich Stauraum. Sie ist eine ideale Lösung für die Unterbringung breiter Chirurgiegeräte, Zentrifugen und Implantatmotoren.

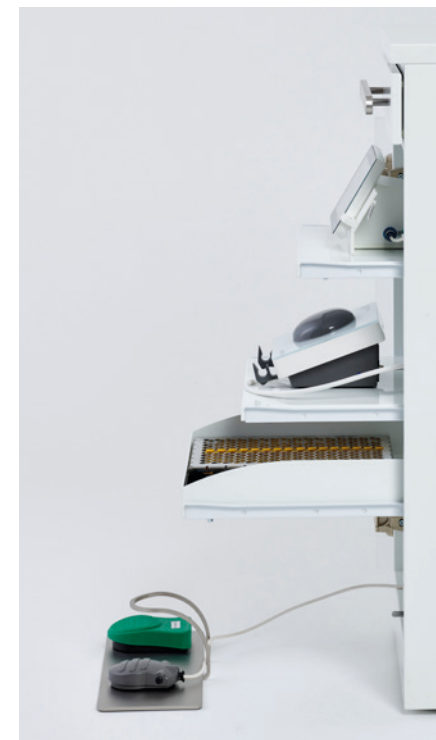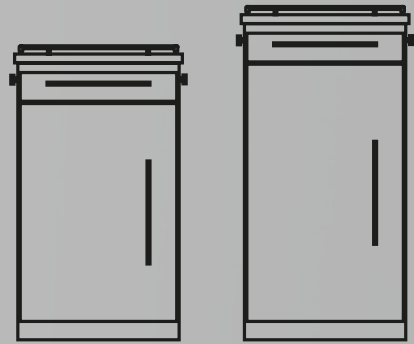

DIE QUALITÄT IST HERAUSRAGEND

„Als Anwender der ersten Stunde bin ich nach wie vor begeistert von den vielen Möglichkeiten, die mir die Carts und die Zubehörsysteme von DEMED bieten. Aus meiner Praxis sind die Geräte einfach nicht mehr wegzudenken und helfen mir unglaublich bei einer effizienten endodontischen Behandlung. Die Qualität ist herausragend, wir hatten nicht einmal im Ansatz irgendein Problem über die vielen Jahre hinweg“

Dr. Christoph Sandweg aus Wuppertal



@Zahnärztekammer Nordrhein/Anne Orthen

P-SERIE

Der Profi für Prophylaxe, Prothetik und vieles mehr.
Diese Serie bietet vielseitige Kombinationsmöglichkeiten,
für eine Vielzahl von Anwendungen im Praxisalltag.



DAS PLATZPROBLEM WURDE PERFEKT GELÖST

„Ich bin wirklich begeistert von euren Produkten! Das Platzproblem in meiner Praxis ist jetzt perfekt gelöst. Implantatmotor, Piezosurgery und Zentrifuge passen jetzt alle in einen Cart und sind immer griffbereit.“

Außerdem hat sich die Ergonomie spürbar verbessert.

Vielen Dank für diese innovative Lösung, die meinen Arbeitsalltag deutlich erleichtert hat!“

*Dr. Sammy Noubissi
aus Washington, USA*



PX-SERIE

Durch die kompakte Bauweise mit 80 cm Höhe nimmt der Cart nur wenig Platz in Anspruch und bietet dennoch Platz für Laptop, Geräte und Zubehör.




LED im Unterboden verbaut



Fest verbauter Monitorhalter auf Wunsch (Nur PX5s)

K-SERIE

Kieferorthopädie kompakt: Ihr kieferorthopädisches Zubehör, wie Zangen und Drahtbögen, werden in unserem Medical Cart durch Instrumentenhalter und Sortiereinsätze perfekt geordnet.

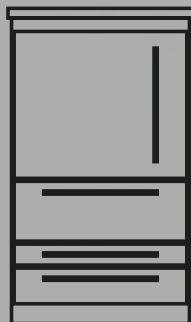

Flexible Schubladeneinteilung

S-SERIE

Der Cart mit den Schubladen:
Organisierter Stauraum – wählbar in zwei Breiten,
drei Korpus- und fünf Schubladenhöhen. Auf Wunsch
mit Staubschutzlippen nach RKI-Richtlinien und
optionalem Zubehör.




Schubladen mit Vol্লাuszug und Softeinzug



Fünf Schubladenhöhen verfügbar

TRAY-CART

Für eine klare Trennung von reinen und unreinen medizinischen Utensilien sorgt unser Tray-Cart. Er bietet Platz für bis zu 22 Standard-Trays und verfügt über ein flexibles Haltersystem aus Edelstahl.

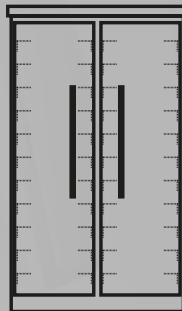


INSTRUMENTENTISCH

Eine perfekte Ergänzung bietet der fahrbare Instrumententisch. Mit seiner höhenverstellbaren Lift-Funktion und der optionalen Normschiene zum Anbringen von weiterem Zubehör, ist er die ideale Assistenz.




Optional mit Normschiene

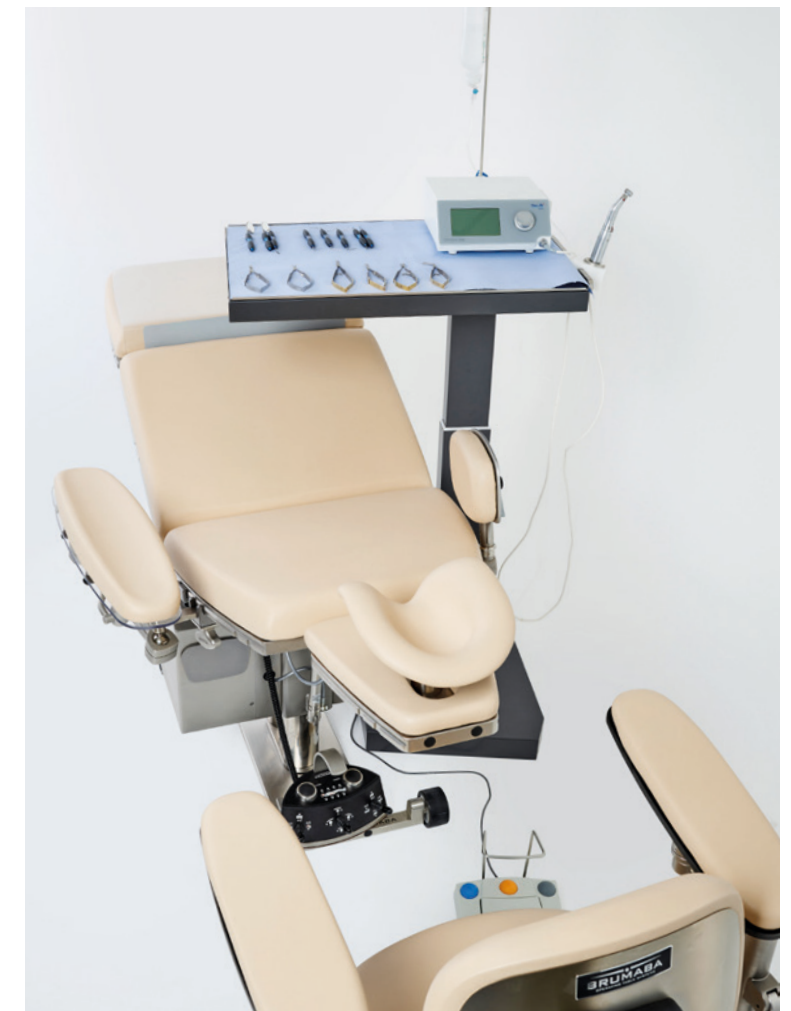

BRÜCKENTISCH

Kabelloser, elektrisch verstellbarer OP-Tisch.
Sorgt für eine sanfte und ruckelfreie Höhenanpassung
und kann für verschiedene medizinische
Anwendungen eingesetzt werden.

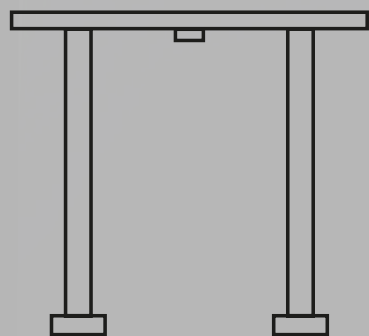

Taster für
Höhenverstellung





Edelstahlablage mit
erhöhter Kante



ZUBEHÖR


Ergänzend zu unseren Carts haben wir zahlreiche Lösungen wie Instrumentenhalter, Facheinsätze und vieles mehr im Programm.

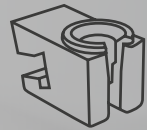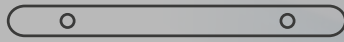

Halter aus POM für Instrumente
Mit oder ohne Inlay aus Edelstahl,
autoklavierbar, passend für
Normschiene.



Halter-Set
Für Endodontie.

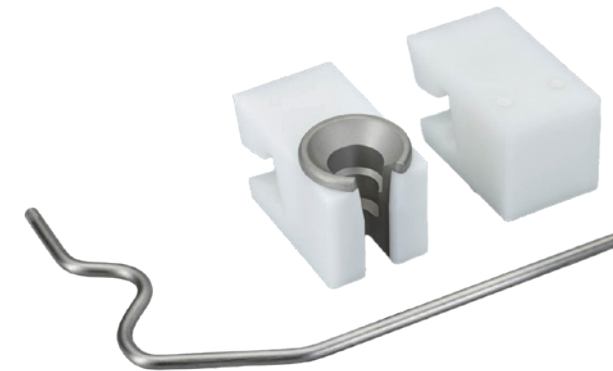

Halter-Set
Für Implantologie.


Infusionshalter
Auch einzeln erhältlich.



Zangenhalter
Flexibel für bis zu 26 Zangen, frei positionierbar
oder zum Anhängen an der Normschiene.




Normschiene
Edelstahl Vollmaterial, gestrahlt, Lieferumfang
inkl. Abstandshalter und Edelstahlschrauben.

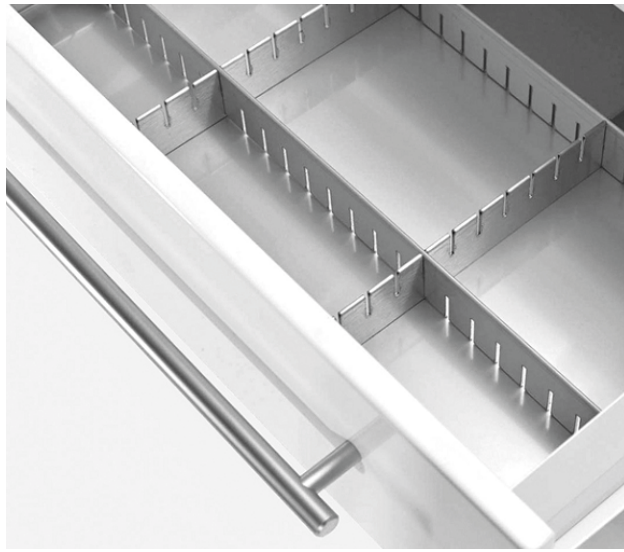

Schubladeneinsatz mit Fächern

Edelstahleinsatz inkl. 4 flexibel positionierbaren Leisten, passend für verschiedene Carts.

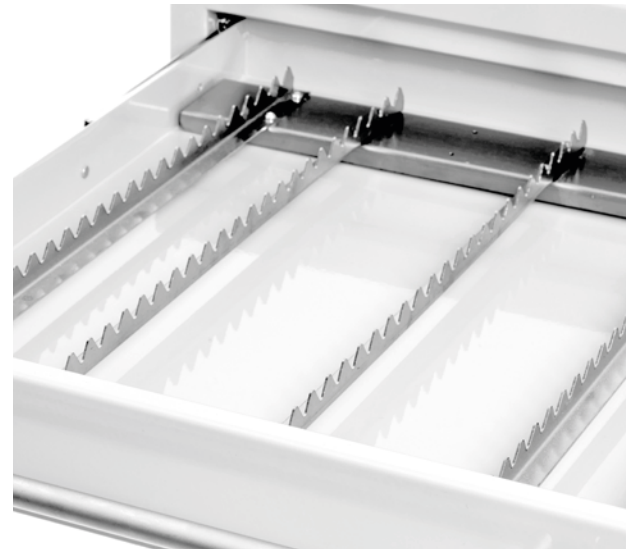

Schubladeneinsatz für Instrumente

Instrumentenhalter inkl. 4 Leisten, max. 52 Aufnahmen, passend für verschiedene Carts.




Fachauszug hoch

Verschiedene Größen und Farben.



Fachauszug Tablar


Verschiedene Größen und Farben.

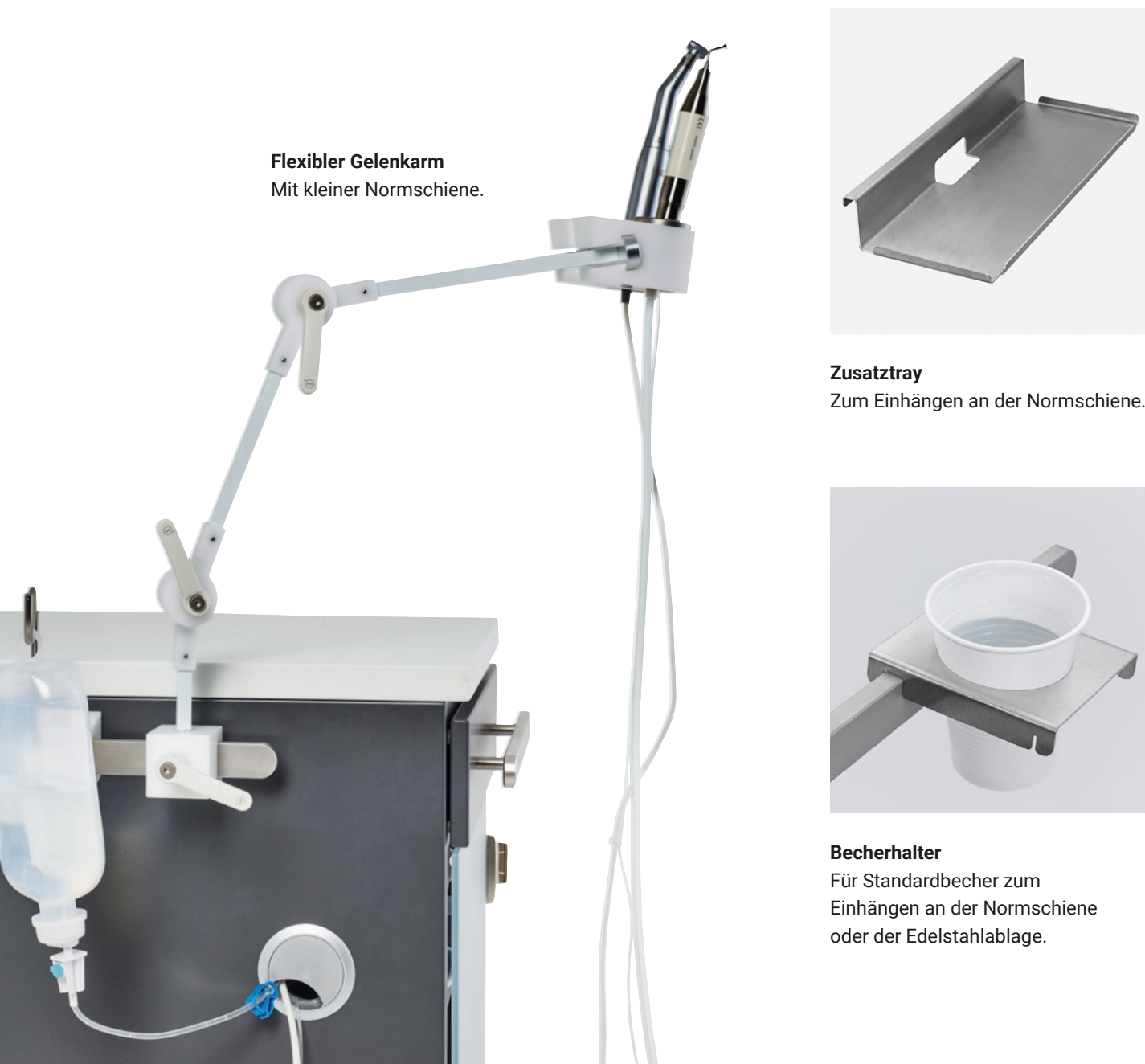

Flexibler Gelenkarm
Mit kleiner Normschiene.

Zusatztray
Zum Einhängen an der Normschiene.

Becherhalter
Für Standardbecher zum Einhängen an der Normschiene oder der Edelstahlablage.

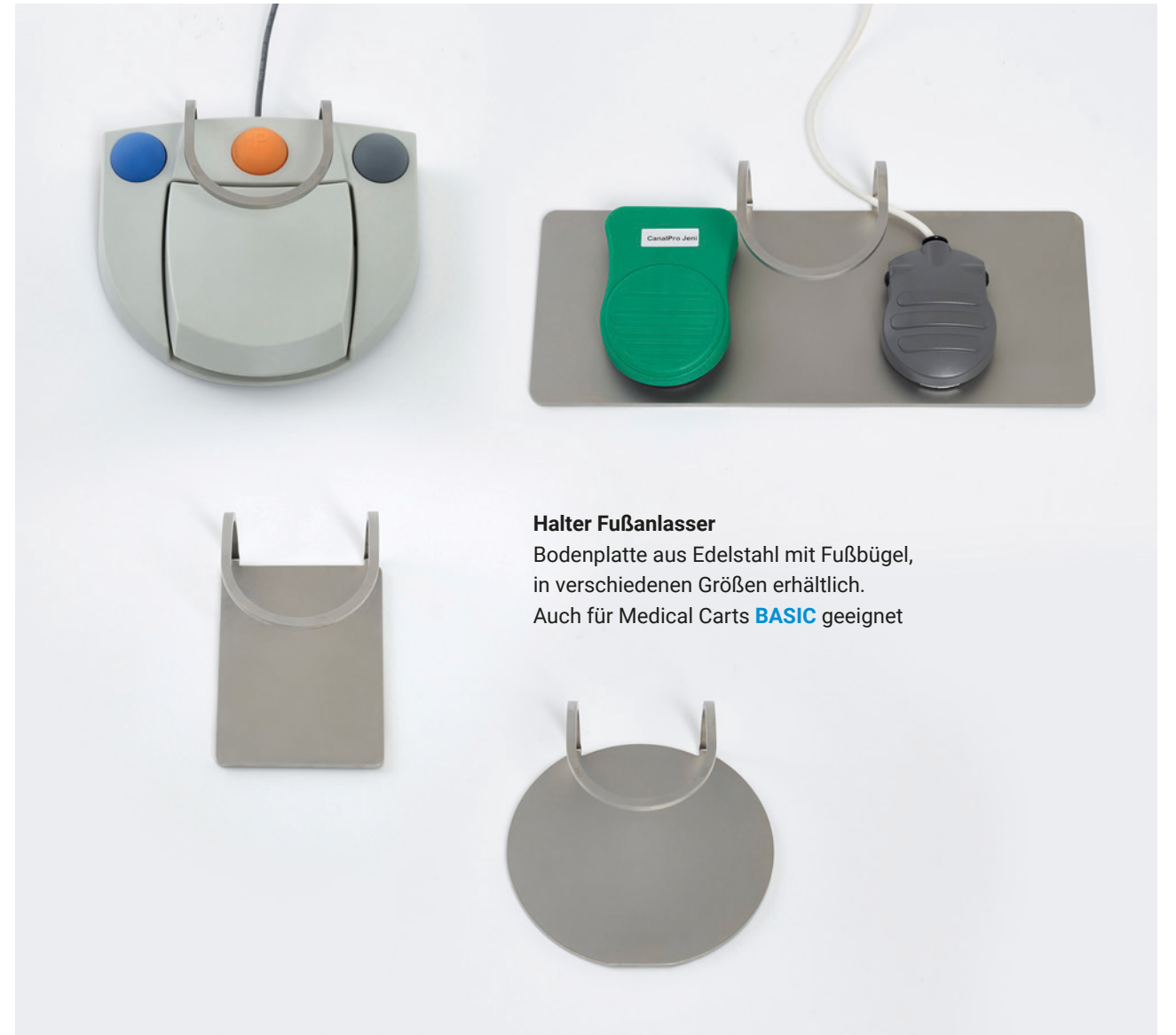


Halter Fußanlasser
Bodenplatte aus Edelstahl mit Fußbügel, in verschiedenen Größen erhältlich. Auch für Medical Carts **BASIC** geeignet

**Edelstahltray**

Zur Erweiterung der Arbeitsfläche.
Einfaches Einhängen an der Normschiene.

**Winkelstückhalter**

Aus Edelstahl, für bis zu 8 Winkelstücke.

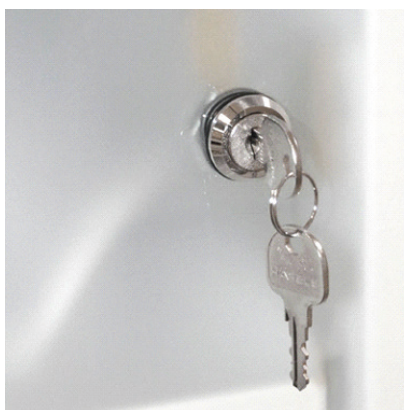**Zylinderschloss**

Für Glastüren.

**Personalisierung**

Ihr Logo auf der Glastür,
mittels Foliendruck.

**Abfallbehälter**

Rahmen aus Edelstahl.
Einfaches Einhängen an
der Normschiene.

**Dispenser-Halterung**

Passend für bis zu drei Dispensing
Guns, als Tischvariante.




MEDICAL CARTS **BASIC**

HOCHWERTIGE MEDIZINISCHE VIELZWECKWAGEN,
IDEAL ALS BEISTELLTISCH ODER ALS GERÄTEABLAGE
IN IHRER PRAXIS.



DL-SERIE

Der DL24 kann in der Praxis als Gerätewagen, Beistelltisch oder Ablage eingesetzt werden zum Beispiel im Bereich Blutabnahme. Er ist aus hochwertig verarbeitetem pulverbeschichteten Stahl für eine sehr lange und robuste Lebensdauer konzipiert.

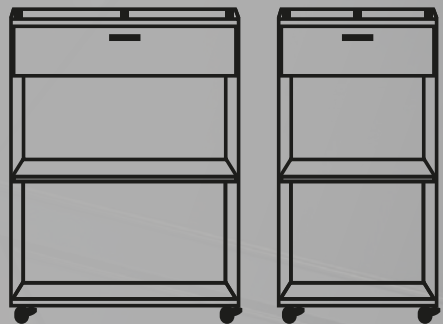

Höhenverstellbarer Einlegeboden
4x Lenkrollen, zwei davon mit Feststeller



In 60 cm oder 40 cm Breite erhältlich



Umlaufende Reling für sicheren Halt




Kabeldurchlässe für einfache Kabelführung



Schublade mit Vollauszug und Soft Close Technik

CX-SERIE

Der CX bietet Platz für bis zu zwei Geräte. Die umlaufende Reling auf der oberen Ablage bietet sicheren Halt. Im stabilen, pulverbeschichteten Rahmen aus Stahl befindet sich integriert eine Dreifachsteckdose mit Netzkabel. Die Kabelauslässe sorgen für eine ordentliche Kabelführung von Geräten, Fußpedalen sowie Luft- und Wasserzugehör.

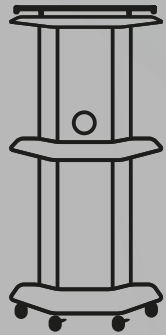


S24-SERIE

Dieser Universalcart könnte in Zukunft in Ihrer Praxis als Scanner-Cart, Endo-Cart oder als Prophylaxe-Cart zum Einsatz kommen. Besonders praktisch ist die integrierte Kabeldurchführung in der Tischplatte und die 3-fach Steckdose mit 3 m Zuleitung im Rahmen. Cart bis 10 kg belastbar. Weitere Ausstattung wie z. B. Normschiene oder Monitorhalter auf Anfrage erhältlich.



WELCHER CART FÜR WAS?

ENDO
CHIRURGIE
AUFBEWAHRUNG

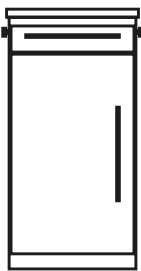

E-SERIE


- E5 Korpus (B x T x H): 42 cm x 50 cm x 90 cm**
- eine Schublade mit Vollauszug fest verbaut
 - drei Fachauszüge hinter der Glastüre
 - Abmessung mit Normschiene: + 3 cm je Seite
 - Kabelauslässe: 2 x rechts, 2 x links, 1 x Rückseite

Arbeitsplatte:
Wahlweise Stahl in Korpusfarbe mit Reling oder Mineralwerkstoff in „White“

- Ausstattung:**
- Tür: Aus satiniertem ESG-Sicherheitsglas, 270° öffnend, mit Stahlgriff und magnetischer Arretierung
 - Kabelmanagement: Im Unterboden integrierte 3-fach-Steckdosenleiste mit automatischer Kabelaufwicklung
 - Normschienen: Aus Edelstahl, rechts und links montiert
 - Rollen: Vier kugelgelagerte, leichtgängige Rollen

Farbe:
Die Standardfarbe ist Verkehrsweiß (RAL 9016). Alle Sonderfarben (RAL Classic) erhalten Sie gegen Aufpreis.

ENDO
CHIRURGIE
AUFBEWAHRUNG

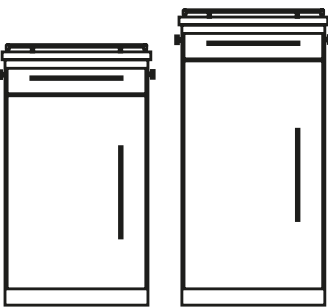

D-SERIE

- D1 Korpus (B x T x H): 50 cm x 50 cm x 90 cm**
- eine Schublade mit Vollauszug fest verbaut
 - zwei flache Fachauszüge hinter der Glasscheibe
 - Abmessung mit Normschiene: + 3 cm je Seite
 - Kabelauslässe: 2 x rechts, 2 x links, 1 x Rückseite


- D5 Korpus (B x T x H): 50 cm x 50 cm x 108 cm**
- eine Schublade mit Vollauszug fest verbaut
 - zwei flache Fachauszüge, ein hoher Fachauszug
 - Abmessung mit Normschiene: + 3 cm je Seite
 - Kabelauslässe: 3 x rechts, 3 x links, 1 x Rückseite

Arbeitsplatte:
Wahlweise Stahl in Korpusfarbe mit Reling oder Mineralwerkstoff in „White“

- Ausstattung:**
- Tür: Aus satiniertem ESG-Sicherheitsglas, 270° öffnend, mit Stahlgriff und magnetischer Arretierung
 - Kabelmanagement: Im Unterboden integrierte 3-fach-Steckdosenleiste mit automatischer Kabelaufwicklung
 - Normschienen: Aus Edelstahl, rechts und links montiert
 - Rollen: Vier kugelgelagerte, leichtgängige Rollen

Farbe:
Die Standardfarbe ist Verkehrsweiß (RAL 9016). Alle Sonderfarben (RAL Classic) erhalten Sie gegen Aufpreis.

ENDO
PROPHYLAXE
ABFORMUNG
AUFBEWAHRUNG

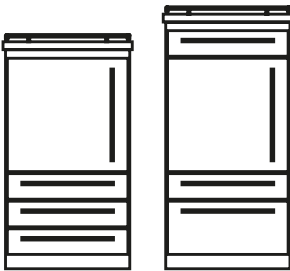

P-SERIE

- P1 Korpus (B x T x H): 42 cm x 50 cm x 90 cm**
- drei bis vier Schubladen mit Vollauszug
- P3 Korpus (B x T x H): 42 cm x 50 cm x 80 cm**
- zwei bis drei Schubladen mit Vollauszug

P5 Korpus (B x T x H): 50 cm x 50 cm x 80 cm


- zwei bis drei Schubladen mit Vollauszug

Arbeitsplatte:
Wahlweise Stahl in Korpusfarbe mit Reling oder Mineralwerkstoff in „White“

- Ausstattung:**
- Mindestens ein Fachauszug hinter der Glastüre
 - Tür: Aus satiniertem ESG-Sicherheitsglas, 270° öffnend, mit Stahlgriff und magnetischer Arretierung
 - Kabelmanagement: Im Unterboden integrierte 3-fach-Steckdosenleiste mit automatischer Kabelaufwicklung
 - Rollen: Vier kugelgelagerte, leichtgängige Rollen

Farbe:
Die Standardfarbe ist Verkehrsweiß (RAL 9016). Alle Sonderfarben (RAL Classic) erhalten Sie gegen Aufpreis.

ENDO
SCANNER
CHIRURGIE
PROPHYLAXE

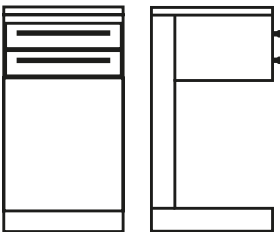

PX-SERIE

- PX3 Korpus (B x T x H): 40 cm x 40 cm x 80 cm**
- Zwei H3* Schubladen (ohne Einsätze), 3-fach Steckdosenleiste mit automatischer Kabelaufwicklung sowie weißes LED-Band im Unterboden integriert.


- PX3s Korpus (B x T x H): 40 cm x 40 cm x 80 cm**
- Zwei H3* Schubladen (ohne Einsätze), seitlich angebrachtes Schienensystem (+2 cm pro Seite) inkl. Einhängetray zur Scannerablage, 3-fach Steckdosenleiste mit automatischer Kabelaufwicklung sowie weißes LED-Band im Unterboden integriert.

- PX5s Korpus (B x T x H): 57 cm x 40 cm x 80 cm**
- Zwei H3 Schubladen, ohne/mit Monitorhalterung, inkl. seitlich angebrachtes Schienensystem (+2 cm pro Seite), integrierte 5-fach Steckdosenleiste mit automatischer Kabelaufwicklung, weißes LED-Band im Unterboden integriert, Türe mit Push-to-open.

- Ausstattung:**
- Kabelauslässe: 1 x rechts, 1 x links, 1 x unten mittig
 - Schubladen mit Vollauszug und Fachauszüge frei kombinierbar
 - Integriertes LED-Band: Standardfarbe weiß (RGB Farbwechsel mit Fernbedienung gegen Aufpreis)
 - Rollen: Vier kugelgelagerte, leichtgängige Rollen.

Farbe:
Die Standardfarbe ist weiß (RAL 9016). Alle Sonderfarben (RAL Classic) erhalten Sie gegen Aufpreis.

KIEFER-
ORTHOPÄDIE

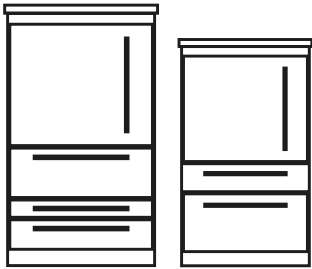

K-SERIE

K1 Korpus (B x T x H): 50 cm x 50 cm x 90 cm
- drei Schubladen mit Volllauszug


K3 Korpus (B x T x H): 50 cm x 50 cm x 80 cm
- zwei Schubladen mit Volllauszug

Arbeitsplatte:
Wahlweise Stahl in Korpusfarbe mit Reling
oder Mineralwerkstoff in „White“

Ausstattung:
- drei Fachauszüge hinter der Glastüre
- Tür: Aus satiniertem ESG-Sicherheitsglas, 270°
öffnend, mit Griff und magnetischer Arretierung
- Rollen: Vier kugelgelagerte, leichtgängige Rollen
- Keine Stromversorgung

Farbe:
Die Standardfarbe ist Verkehrsweiß (RAL 9016).
Alle Sonderfarben (RAL Classic) erhalten Sie gegen
Aufpreis.

AUFBEWAHRUNG

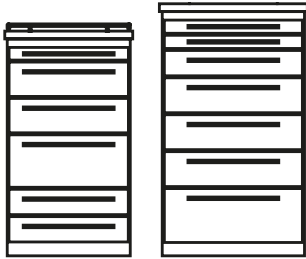

S-SERIE


S1 Korpus (B x T x H): 50 cm x 50 cm x 90 cm
S3 Korpus (B x T x H): 42 cm x 50 cm x 90 cm
S5 Korpus (B x T x H): 42 cm x 50 cm x 80 cm
S5 B Korpus (B x T x H): 50 cm x 50 cm x 80 cm

- Schubladen mit Volllauszug, in zwei Breiten und
fünf Höhen erhältlich
- Rollen: Vier kugelgelagerte, leichtgängige Rollen
- Auf Wunsch mit Staubschutzlippen nach
RKI-Richtlinien
- Normschiene optional

Arbeitsplatte:
Wahlweise Stahl in Korpusfarbe mit Reling oder
Mineralwerkstoff in „White“

Farbe:
Die Standardfarbe ist Verkehrsweiß (RAL 9016).
Alle Sonderfarben (RAL Classic) erhalten Sie gegen
Aufpreis.

AUFBEWAHRUNG

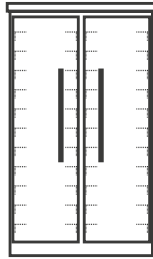


TRAY-CART

(B x T x H): 50 cm x 50 cm x 90 cm
- Platz für bis zu 22 Standard-Trays
- Flexibles Haltersystem aus Edelstahl
- Mittlere Raumteilung (Staubdicht)
- Vier kugelgelagerte, leichtgängige Rollen

Arbeitsplatte:
Arbeitsplatte aus Stahl in Korpusfarbe

Farbe:
Die Standardfarbe ist Verkehrsweiß (RAL 9016).
Alle Sonderfarben (RAL Classic) erhalten Sie gegen
Aufpreis.

FAHRBARE
INSTRUMENTENTISCHE

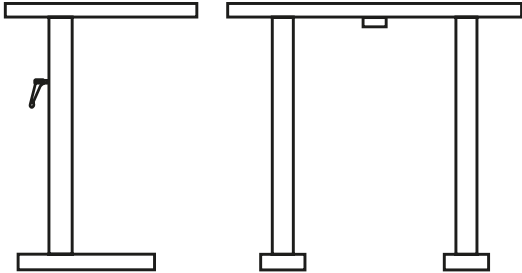

I-SERIE

I3 Instrumententisch
(B x T x H): 65 x 45 cm x 78–120

- Stufenlos höhenverstellbar mit Hebelgriff
von 78 cm bis 120 cm
- Maße Auflage: 65 cm x 45 cm
- Material: Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahl
mit geschliffener Edelstahlauflage
- Rollen: Vier kugelgelagerte, leichtgängige Rollen

Farbe:
Die Standardfarbe ist Verkehrsweiß (RAL 9016).
Alle Sonderfarben (RAL Classic) erhalten Sie gegen
Aufpreis.


I5 Brückentisch
(B x T x H): 100 x 60 cm x 66–125

- Elektrisch höhenverstellbar von 66 cm bis 125 cm
- Maße Auflage: 60 cm x 100 cm
- Material: Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahl
mit geschliffener Edelstahlauflage
- Rollen: Vier kugelgelagerte, leichtgängige Rollen
- Normschiene optional

Farbe:
Erhältlich nur Verkehrsweiß (RAL 9016) oder
Tiefschwarz (RAL 9005)

WIR BERATEN SIE GERNE

PRAXISCART

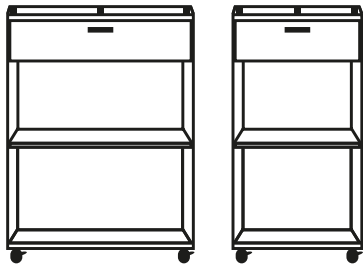

DL-SERIE

Ausstattung:


- Rahmen mit umlaufender Reling für sicheren Halt
- Schublade mit Vollauszug und Soft Close Technik
- 4x Lenkrollen, zwei davon mit Feststeller
- Rahmen aus Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- 2 Kabeldurchlässe für einfache Kabelführung
- Max. Tragkraft: 50 kg; Max. Tragkraft Schublade: 10 kg
- Vormontierte Elemente für einfachen Zusammenbau und schnellen Einsatz

Farbe:

Die Standardfarben sind Verkehrsweiß (RAL 9016) oder Tiefschwarz (RAL 9005).

Alle Sonderfarben (RAL Classic) erhalten Sie gegen Aufpreis.

UNIVERSALCART

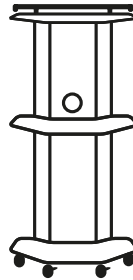

CX-SERIE

CX Korpus (B x T x H): 40 cm x 38 cm x 85 cm

Ausstattung:


- Obere Ablage mit umlaufender Reling für sicheren Halt
- 4x Lenkrollen, zwei davon mit Feststeller
- 2 Kabelauslässe für eine ordentliche Kabelführung
- Grundplatte mit 3 Öffnungen für Fußpedale sowie Luft- und Wasserzubehör
- Integrierte Dreifachsteckdose mit Netzkabel
- Material: Stahlblech, pulverbeschichtet in weiß
- Vormontierte Elemente für einfachen Zusammenbau und schnellen Einsatz

Farbe:

Die Standardfarben sind Verkehrsweiß (RAL 9016) oder Tiefschwarz (RAL 9005).

Alle Sonderfarben (RAL Classic) erhalten Sie gegen Aufpreis.

UNIVERSALCART

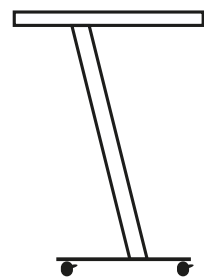

S24-SERIE

S24 Korpus (B x T x H): 57 cm x 43 cm x 85 cm

Ausstattung:

- 4x Lenkrollen, zwei davon mit Feststeller
- Integrierte Kabeldurchführung in der Tischplatte
- 3-fach Steckdose mit 3 m Zuleitung, platzsparend im Rahmen integriert
- Cart bis 10 kg belastbar

Optional auf Anfrage erhältlich:

- Normschiene beidseitig montierbar
- Halter für Monitor, Netzteil oder Powerbank nachrüstbar
- Personalisierung mit eigenem Logo
- Vormontierte Elemente für einfachen Zusammenbau und schnellen Einsatz

Farbe:

Die Standardfarben sind Verkehrsweiß (RAL 9016) oder Tiefschwarz (RAL 9005).

Alle Sonderfarben (RAL Classic) erhalten Sie gegen Aufpreis.

WIR BERATEN SIE GERNE

SERVICE UND BERATUNG

Auch Sie möchten Ihre Praxis, Klinik oder Ihr Dentallabor mit unseren DEMED MEDICAL Carts ausstatten und benötigen noch Hilfe bei der Entscheidungsfindung, dann kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne.

info@demedmedical.de
Tel. +49 711 87034417



**Individuelle Lösungen werden
auf Ihre Bedürfnisse angepasst**



**Wir beraten Sie gerne
per Telefon, Mail, Videocall
oder in Ihrer Praxis**



**Treffen Sie uns auf einem
Kongress oder einer Messe,
national oder international**



**Alle Produkte sind bei
Lieferung bereits vormontiert
und sofort einsatzbereit**

Hinweise: Die im Katalog abgebildeten Geräte und Instrumente sind nicht im Lieferumfang enthalten. Technische Änderungen, druckbedingte Farbabweichungen und Irrtümer vorbehalten. Sämtliche Maße, Modellvarianten und Preise finden Sie in unserer separaten Preisliste.
Fotografie: Peter Oppenländer Fotodesign (www.peter-oppenlaender.de), Sonstige Bilder: Freepik.com, Design: DEMED Grafikabteilung



DEMED MEDICAL GmbH | Hortensienweg 1 | D-70374 Stuttgart

 Tel. +49 711 87034417  info@demedmedical.de  demedmedical.de   [demedmedical](https://www.facebook.com/demedmedical)